

Comfortabel in- en uitstappen



Welzorg Autoaanpassingen

Een aangepaste auto biedt maximale bewegingsvrijheid aan mensen die minder mobiel zijn. Welzorg Autoaanpassingen is het aangewezen adres voor aangepast autorijden. Onze specialisten beheersen het vak tot in hun vingertoppen, zowel in technisch als in ergonomisch opzicht.

Turnout draaizitting

Een draaizitting maakt het in- en uitstappen aanzienlijk eenvoudiger. Deze wordt een kwartslag naar buiten gedraaid, waardoor u direct kunt plaatsnemen. Hierna wordt de zitting naar binnen gedraaid en keert hij weer in de rijrichting. Al onze speciale autostoelen en in veel gevallen ook de originele autostoelen passen rechtstreeks op de draaiconsole.



*Optioneel
elektrisch
bedienbaar*



*Geschikt voor
beide zijden
van de auto*

Indien het in- en uitstappen met een begeleider gebeurt, kan de draaizitting worden voorzien van een extra schuif- slede. De zitting wordt dan eerst 90° gedraaid en vervolgens door de deuropening naar buiten getrokken.

Naast de draaizittingen zijn er nog diverse andere mogelijk- heden om het in- en uitstappen te vereenvoudigen. Zoals de stijgzit, die u helpt om moeiteloos in of uit te stappen. In de ruststand is de stijgzit opgeklapt naast de autostoel en neemt dan nauwelijks ruimte in.




De uitschuifbare elektrische instaptrede komt automatisch te voorschijn bij het openen van het portier en overbrugt het hoogteverschil tussen de weg en de auto.

Met een verlengde stoelslede kunt u de voorstoel van bijna onder het dashboard tot aan de achterbank verschuiven. Hierdoor wordt in- en uitstappen een stuk eenvoudiger.

Het Carony-systeem

Uniek en makkelijk hanteerbaar. Dit systeem vereenvoudigt het in- en uitstappen en zorgt ervoor dat het tillen van de passagier tot het verleden behoort.

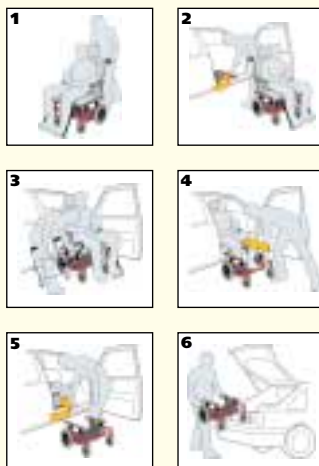


Het Carony-systeem bestaat uit een rolstoelframe, een draaiplaat en een comfortabele stoel, die u zowel in als buiten de auto kunt gebruiken. Met een aantal eenvoudige handelingen plaatst u de rolstoel op de passagiersplaats. De berijder kan hierbij blijven zitten. Het compacte rolstoelframe kunt u in de kofferbak meenemen. Diverse accessoires zijn leverbaar. Het Carony-systeem kan in de meeste personenauto's worden geïnstalleerd.

Turny draai/heflift

Turny is een elektrische draai/heflift, speciaal ontwikkeld voor auto's met een hoger instapniveau, zoals MPV's en bestelauto's. De variabele hoog/laag-functie van Turny is ideaal voor rolstoelgebruikers die zelf transfers in de auto kunnen maken. Het ontwerp en de variabele hoogte van de Turny maken deze stoel gemakkelijk in gebruik voor zowel de gebruiker als de begeleider.

De Turny kan op de meeste plaatsen in de auto worden geïnstalleerd, geheel naar de wensen van de gebruiker. Afhankelijk van het merk en type van de auto kan de Turny met de originele autostoel worden geïnstalleerd. De Turny beschikt over meerdere accessoires, waarmee de stoel eenvoudig is aan te passen aan individuele eisen of wensen en is tevens te combineren met de Carony instapcombinatie.

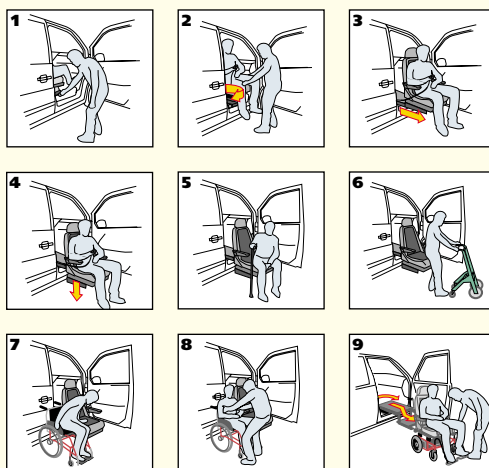

Meer informatie? Dat kan!

Welzorg Autoaanpassingen is door heel Nederland actief. Wij zijn graag bereid om u informatie te verstrekken over onze producten.

Wilt u een afspraak maken? Belt u dan met Welzorg klantenservice **0800 - 0224900**. U kunt ook e-mailen naar **info@welzorg.nl**. Daarnaast is er de mogelijkheid informatie in te winnen op onze internetsite **www.welzorg-auto.com**. Als u al een contactpersoon bij Welzorg heeft, dan kunt u natuurlijk ook deze persoon benaderen.



Internet: **www.welzorg-auto.com**



WELZORG
AUTOAANPASSINGEN